

#whdentalwerk



video.wh.com

Now at
your dealer
or wh.com




Neuvěřitelné uvnitř & zvenku

Nové sterilizátory Lara
Připravené na budoucnost

lara

**Nejrychlejší
B cyklus**
ve svém segmentu

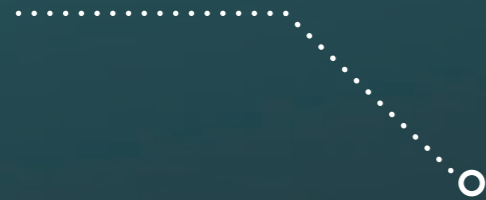


**Automatický záznam
cyklu prostřednictvím
velkokapacitního USB disku**




**Volitelně špičková
tiskárna etiket
a záznamu cyklů**



**Unikátní
možnost
rozšíření**

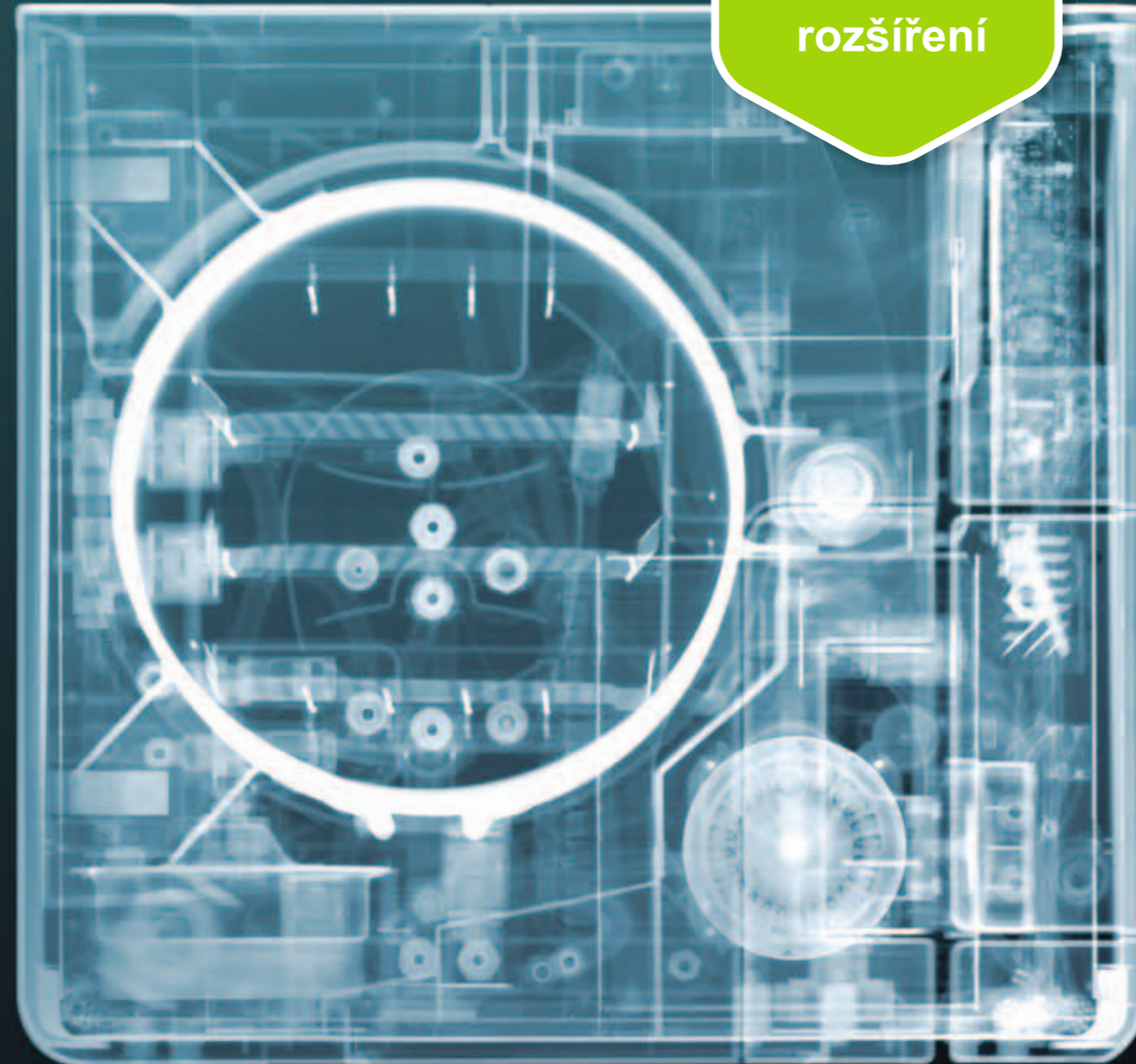


**Ergonomický
a funkční
design**

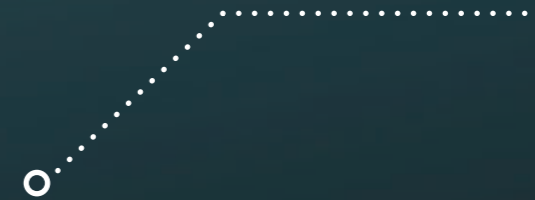

**Barevný dotykový
displej
pro snadnou navigaci**



**Ideální rozměry
pro integraci a
provoz**

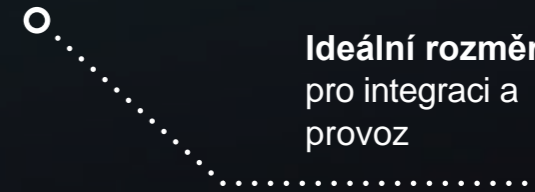

Rentgenový snímek Nicka Veaseyho pro společnost W&H.
Zjistěte více o neuvěřitelné rentgenové práci umělce Nicka Veaseyho
na adrese nickveasey.com

Objevte jednoduché ovládání & spolehlivou sledovatelnost

Lara barevný dotykový displej byl vybrán a navržen tak, aby vám usnadnil, zrychlil a zefektivnil každodenní práci. Lara také nabízí komplexní systém sledovatelnosti přizpůsobený vašim potřebám.

Snadné použití

Inteligentní struktura menu nových sterilizátorů Lara zajišťuje mimořádně vysoký komfort obsluhy: přednastavené programy můžete rychle a intuitivně procházet pomocí velkého barevného dotykového displeje.

Vysokokapacitní záznamník dat

Vysokokapacitní jednotka USB automaticky zaznamenává zprávy o cyklech po celou dobu životnosti. Volitelně k dispozici: Tiskárna etiket a záznamu cyklů, pomocí které můžete dokumentovat sledovatelnost bez dalšího počítače nebo samostatného softwaru.



Identifikace uživatele

Díky aktivačním kódům můžete získat další funkce, jako je identifikace uživatele: uživatel, který náplň do sterilizátoru vložil / vyjmul, může být digitálně zaznamenán. Uživatelé jsou identifikováni šestimístným PIN kódem.



Potvrzení o uvolnění náplně

K dispozici také jako rozšíření: potvrzení o schválení. Tato možnost digitálně zaznamená jméno koncového uživatele a jeho potvrzení o úspěšném sterilizačním nebo testovacím cyklu.



Snadné plnění

Vysokokapacitní integrovaná nálevka zabraňuje stříkání vody během procesu plnění.



Snadný přístup k zásobníkům

Při čištění zásobníků vody lze kryt snadno sejmout bez použití jakýchkoli nástrojů.



Automatické plnění vody

Automatický ventil plnění vody umožňuje připojení demineralizačního systému. Ruční plnění a vypouštění již není nutné.

lara

Objevte jedinečnou možnost upgradu

Ať se v budoucnu stane cokoli, s novými sterilizátory Lara jste vždy dobře připraveni. Inovativní systém upgradů vám nabízí nákladově efektivní, rychlou a na míru přizpůsobenou možnost aktivovat další funkce tak, aby odrážely potřeby vaší praxe nebo vyhovovaly budoucím požadavkům.

Stručný přehled čtyř dalších funkcí:



Výkon

Ještě rychlejší doba cyklu upgradem na Eco Dry+, který automaticky přizpůsobuje dobu sušení hmotnosti náplně. To šetří čas a energii.



Fast cyklus

Rychlý cyklus umožňuje sterilizaci nebalených semikritických nástrojů za pouhých 20 minut.



Sledovatelnost

Funkce »Sledovatelnost« umožňuje přizpůsobení sterilizátoru, a zpětné vysledování osoby, která zahájila sterilizační cyklus. Identifikují se šestimístným PIN kódem přímo v zařízení.



Vše v jednom

Díky aktivacímu kódu »Vše v jednom« získáte všechny výhody najednou - a váš sterilizátor nakonec dosáhne dříve nedosažitelného poměru ceny a výkonu.



Šest kroků k přizpůsobení vašeho sterilizátoru:

Krok 1

Kupte si aktivací kód dle výběru od místního schváleného dodavatele.

Krok 2

Po obdržení souvisejícího přihlašovacího kódu přejděte na activation.wh.com

Krok 3

Tento kód zadáte spolu se sériovým číslem a modelem vašeho sterilizátoru.

Krok 4

Vygeneruje se váš individuální zabezpečený aktivací kód.

Krok 5

Zadejte tento kód do menu vašeho sterilizátoru Lara.

Krok 6

Nová funkce je k dispozici.



Objevte vynikající výkon

Nové sterilizátory Lara nabízejí jeden z nejrychlejších cyklů typu B ve své výkonnostní třídě již od standardní verze. A můžete je ještě vylepšit aktivací doplňkových funkcí Eco Dry+ a Fast cyklus.

Funkce Eco Dry+ automaticky přizpůsobuje dobu sušení náplně - a tím šetří čas a energii. Navíc je prostřednictvím aktivačního kódu k dispozici: rychlý Fast cyklus typu S pro nezabalené, semikritické produkty.



Šetří čas

Zpracování cyklem typu B a perfektní sušení 2 KG NÁPLNĚ ZA MÉNĚ NEŽ 40 MINUT.

Prodlužuje životnost

Automatické nastavení doby sušení v závislosti na náplni zkracuje dobu expozice tepla. Tím se prodlužuje životnost vašich nástrojů.

Šetří energii

Optimalizace doby sušení znamená snížení spotřeby energie. Lara se tak stává "zeleným řešením".



Přepřepování za méně než 23 minut!



Technické údaje

lara



| Sterilization cycle | | B-nebalený 134 | B-balený 134 | B-textil 121 | Fast cyklus volitelně | | |
|---|---------|--|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Teplota: | | 134°C | 134°C | 121°C | 134°C | | |
| Doba držení (v minutách): | | 4' | 10' 30" | 20' 30" | 4' | | |
| Celková délka cyklu (v minutách) včetně kompletního sušení: | Lara 17 | Automaticky od 25' do 51' | 37' | Automaticky od 40' do 65' | 52' | 41' do 73' | 20' do 22' |
| | Lara 22 | Automaticky od 28' do 55' | 39' | Automaticky od 40' do 68' | 54' | 42' do 76' | 20' do 22' |
| Lara 17 náplň: Lara 22 náplň: | | maximálně 4,5 kg/typicky 2 kg/maximálně porézní 1,5 kg | | | max. nebalené 2 kg | max. nebalené 2 kg | |
| Lara 17/22 náplň kontajnerů: | | maximálně 9 kg | | | | | |
| Testovací cykly: | | Helix / Bowie&Dick / vakuový | | | | | |
| Jednotky jsou dodávány s oboustranným stojanem, 3 hliníkovými táckami, vypouštěcí hadičkou, držákem tácky, 8 GB USB diskem, nástrojem na otevírání dvířek, továrním testem. | | | | | | | |

CE CE

| | Lara 17 | Lara 22 |
|---|---|------------------------------|
| Série: | Lara | Lara |
| Typ: | RIL-117 | RIL-122 |
| Velikost komory: | 17 l | 22 l |
| Napájení: | 200–240 V AC; 50/60 Hz; 10 A | 200–240 V AC; 50/60 Hz; 10 A |
| Spotřeba energie: | 2.0–2.4 kW | |
| Celkové rozměry (š x v x h): | 465 x 452 x 646 mm | |
| Hmotnost (prázdné): | 42.5 kg | 44 kg |
| Hlavní/využití nádrže na vodu: | 4.8/4.8 l | |
| Pracovní rozsah: | 7 až 15 cyklů | |
| Využitelný prostor v komoře (š x v x h):⁽¹⁾ | 195 x 195 x 312 mm | 195 x 195 x 400 mm |
| Typy připojení: | 2 porty USB (volitelně 5), integrovaný automatický ventil pro plnění vody | |

(1) Využitelný prostor se vztahuje ke standardní konfiguraci držáku.

| | | |
|--|---|--|
| Sterilizátory Lara byly navrženy, certifikovány a validovány podle nejpřísnějších směrnic a norem: | | |
| 93/42/EHS Směrnice o zdrav. prostředcích | EN 13060 Malé parní sterilizátory | IEC 61010-1 Bezpečnostní požadavky |
| 2014/68/EU Směrnice o tlakových zařízeních | IEC 61326-1 Elektromagnetická kompatibilita | IEC 61010-2-040 Zvláštní požadavky na parní sterilizátor |
| IEC 61770 Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti | | |
| › Sterilizátor lze validovat podle normy EN ISO 17665-1. | | |

Bezpečné a úplné přepracování díky společnosti W&H

Sterilizace, hygiena a údržba jsou v zubní ordinaci stále důležitější. W&H nabízí nejlepší postupy hygienického protokolu jako kompletní řešení pro zpracování vašich přímých a kolénkových násadců a turbínek.



W&H nabízí širokou škálu příslušenství pro optimalizaci procesu sterilizace. Drobné doplňky vedou k velkým výsledkům. Práce v praxi je snazší a váš tým šetří čas.

Všechno závisí na vašich požadavcích

Po celá léta byla společnost W&H známá jako průkopník v oblasti sterilizace. Naším největším cílem je vyvinout inovativní, spolehlivé a rychlé sterilizátory, které dokonale zapadnou do prostředí individuální praxe a pracovního postupu. S naší řadou sterilizátorů jsme schopni nabídnout perfektní sterilizátor pro každou poptávku.

Zjistěte více o naší rodině sterilizátorů: nyní u místního dodavatele dentálních přístrojů nebo na wh.com



W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Dodatečné vybavení a příslušenství není součástí standardní výbavy.

20494 CZE Rev. 000 / 12.07.2021
Změny vyhrazeny.